

A woman with long, wavy brown hair and blue eyes, wearing a dark blue blazer over a dark top, is smiling slightly and holding a small, white, bulb-shaped device with a long, thin, curved nozzle. The device is the Navina Mini. The background is a plain, light blue-grey color.

# KLEIN IN GEBRUIK, GROOT IN EFFECT

Navina™ Mini kan uw darmproblemen verlichten.  
Een intuïtieve oplossing voor ongewenst  
ontlastingsverlies en onvolledige lediging.

**Navina**™ Mini

# NAVINA MINI WERKT BEVRIJDEND

Darmproblemen kunnen een grote invloed hebben op uw gezondheid en dagelijks leven. Ze kunnen zorgen voor ongemak en schaamte, waardoor u misschien sociale situaties vermijdt uit angst voor ongelukjes.

Deze problemen komen vaker voor dan u misschien denkt, maar er wordt niet veel over gepraat. Gelukkig zijn er hulpmiddelen die kunnen helpen.

Een van deze oplossingen is **Navina Mini** – een eenvoudig hulpmiddel dat kan helpen als u klachten ervaart als:

- ✓ Ongewenst ontlastingsverlies
- ✓ Onvolledige lediging

## EEN KLEINE OPLOSSING VOOR DIRECT RESULTAAT

Navina Mini is een discreet en eenvoudig hulpmiddel voor darmspoeling met een laag watervolume.

Het helpt bij klachten zoals ongewenst ontlastingsverlies of bij het gevoel van onvolledige lediging. Met slechts een klein beetje water wordt het rectum schoongespoeld. Dit geeft direct verlichting en voorkomt ongelukjes.



# EEN SLIM ONTWERP MAAKT HET GEBRUIK EENVOUDIG

## Past gemakkelijk in de hand

Voor ergonomisch gebruik.

## Waterreservoir bevat 185 ml water

Slechts één keer knijpen.

## Afgeronde gecoate tip

voor comfortabel inbrengen.

## Hygiënisch

Schoonsoelen én schoon blijven.

## Verlengslang

Ervaar de flexibiliteit van de verlengslang.

## Soepel en stevig ontwerp

- Soepel materiaal, reservoir is gemakkelijk leeg te knijpen
- Waterreservoir en optionele verlengslang kunnen tot 60 keer gebruikt worden.
- Rectale conus is voor éénmalig gebruik.
- Navina Mini is 100% vrij van PVC en ftalaten.




## GEBRUIKSAANWIJZING




1

Ga in een gemakkelijke positie op het toilet zitten. Breng de conus in via de anus.

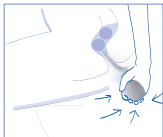

2

Spoel voorzichtig het rectum door het waterreservoir in te knijpen.

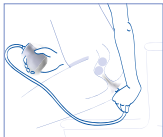

3

Gebruik de verlengslang voor een beter bereik als u dat wenst.



Scan de QR code voor de volledige gebruiksinstructie.

## Navina Bowel Care. Een complete familie van darmspoelproducten.

Wij weten dat behandeling van darmproblemen voor iedereen anders is. Daarom bieden wij een breed scala aan oplossingen die aansluiten bij individuele behoeften. Onder één merk garanderen we dezelfde kwaliteit, gebruiksgemak en flexibiliteit, ongeacht welk product u kiest.

Bekijk ons volledige assortiment Navina producten door de QR-code te scannen en onze website te bezoeken.



## Navina Mini

### Beoogd gebruik

Navina Mini is bedoeld voor het darmspoelen met een kleine hoeveelheid water die in de endeldarm wordt ingebracht via de anus met een eenmalig te gebruiken rectale conus.

### Indicaties

Navina Mini is geïndiceerd voor volwassenen, jongeren en kinderen vanaf 3 jaar die last hebben van incomplete lediging van stoelgang en/of incontinentie van ontlasting.

### Contra-indicaties

- Bekende anale of colorectale stenose
- Een actieve ontsteking aan de darm
- Acute diverticulitis en diverticulair abces
- Colorectale kanker
- Ischemische colitis
- Anale of colorectale chirurgie die minder dan drie maanden geleden heeft plaatsgevonden

Aangezien de lijst niet volledig kan zijn, zullen zorgverleners altijd rekening houden met individuele factoren en omstandigheden. Zie voor gebruik de gebruiksaanwijzing.



Manufacturer:  
Wellspect HealthCare,  
Aminogatan 1, P.O. Box 14,  
SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00.  
www.wellspect.com



Reference	Type	Specification
6930700	Navina Mini Set	1 waterreservoir, 30 rectale conussen
6930800	Navina Mini Extension Set	1 waterreservoir, 30 rectale conussen, 1 verlengslang
6930900	Navina Mini Refill Set	30 rectale conussen

Bij Wellspect waarderen we de mensen achter ons succes als toonaangevende leverancier van levensveranderende producten voor het behandelen van darm- en blaasproblemen, zoals de bekende merken LoFric® en Navina™. Wereldwijd zijn er duizenden gebruikers en zorgverleners die met onze producten werken. Zij zijn de inspiratie voor onze innovatieve oplossingen. Wij weten dat samenwerking de beste manier is om continentie zorg te verbeteren. Dit geeft onze gebruikers meer tijd om te leven. Voortbouwend op 40 jaar levensverbeterende prestaties, streven wij ernaar om elke dag een echt verschil te maken voor iedereen die onze producten en diensten nodig heeft.

**Wellspect. A Real Difference.**

[wellspect.nl](https://www.wellspect.nl)



Wellspect HealthCare, Signaalrood 55, 2718 SG, Zoetermeer, Nederland.

Tel. NL: +31 79 363 70 10. Fax NL: +31 79 362 37 48. [www.wellspect.nl](https://www.wellspect.nl)

Tel. BE: +32 3 232 06 15. Fax BE: +32 3 305 52 11. [www.wellspect.be](https://www.wellspect.be)